


SERINGUE AUTOMATIQUE SOCOREX® ULTRA 1810


Porte-flacon - Guide Rapide

Réglage du corps

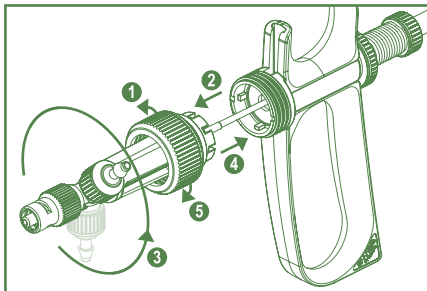


Placer la soupape d'entrée en position verticale.

Mise en place du flacon

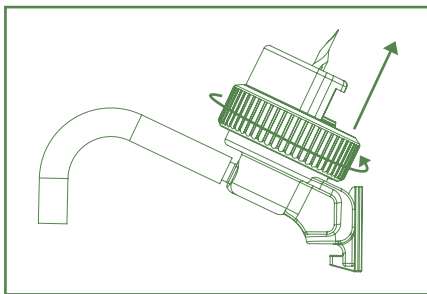


Enlever l'écrou.


Montage

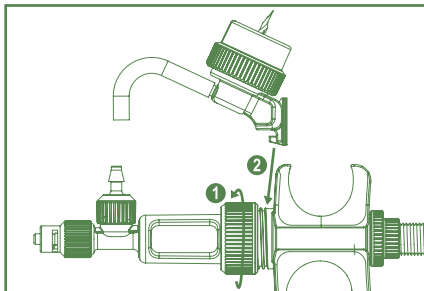


Dévisser l'écrou.
Insérer le porte-flacon jusqu'à la butée.

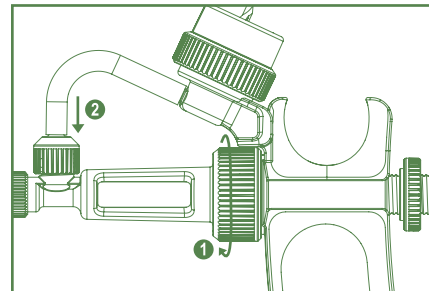

Serrer l'écrou pour verrouiller le porte-flacon.
Raccorder le tuyau sur la soupape d'entrée.

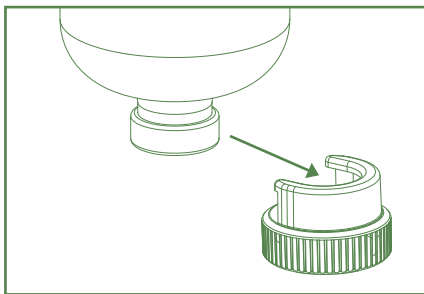

Introduire le flacon dans l'écrou.

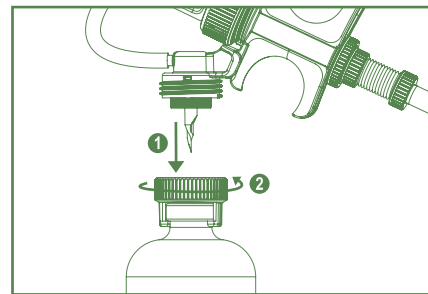


En tenant la seringue à l'envers, percer le septum avec l'aiguille.
Visser l'écrou pour bloquer la bouteille.




Ne pas serrer trop fort pour ne pas endommager les cartouches.

Amorçage

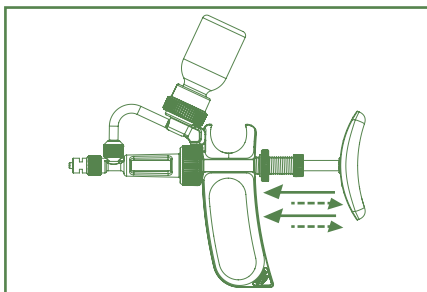


Retourner la seringue, activer le piston pour aspirer et éjecter le liquide.

Retrait du flacon

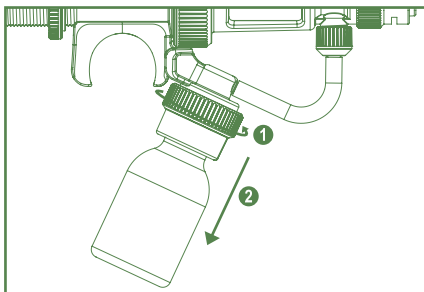


Mettre la seringue à l'envers.
Dévisser l'écrou pour enlever le flacon.

Purge et rinçage

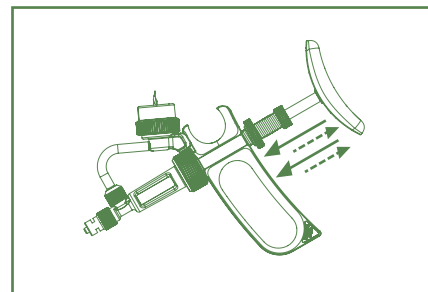


Activer le piston pour éliminer le liquide.

Démontage et nettoyage

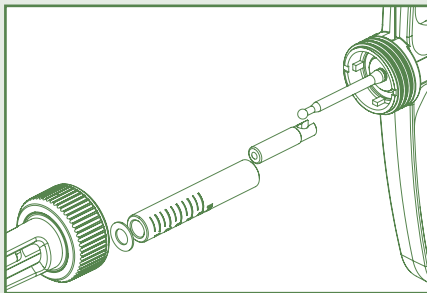

Démonter et nettoyer selon le mode d'emploi de la seringue.

En cas d'aiguille endommagée

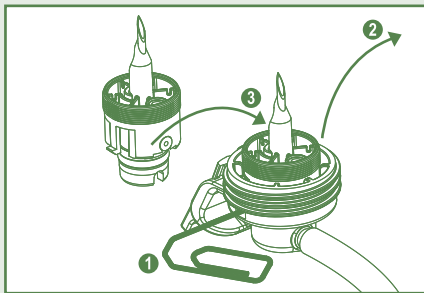

Pousser le clip et enlever l'aiguille assemblée.
Mettre une nouvelle aiguille.



Aiguille affûtée = risqué de blessures
Ne pas percer le même flacon plusieurs fois.

Commande

| Description | Emb. | N° cat. |
|----------------------------------|--------|------------|
| Kit porte-flacon | 1 / pk | 1.1810.010 |
| Raccord tuyau de rechange, 55 mm | 1 / pk | 1810.716 |
| Aiguille assemblée | 1 / pk | 1810.386 |
| Ecrou flacon | 1 / pk | 1810.374 |



I.1810VIAL.F - A0523