

**Qualitix® Sterilisationsbeutel**

Passend für alle kleinen und mittelgrossen Labor-, Medizin-, Dental- oder Veterinär-Instrumente. Die Qualitix® Einwegbeutel dienen der einfachen und effektiven Verpackung von Sterilisationsgut. Die aus robustem Papier der medizinischen Güteklasse hergestellten Beutel lassen sich einfach durch das selbstklebende Band dicht verschliessen und erhalten so die Sterilität. Der Inhalt ist immer sichtbar durch die transparente PET / CPP Folie.

- Robustes, beständiges Material
- Schnelle Erkennung des Inhaltes
- Breiter, selbstklebender Steifen, einfach zu verschliessen
- Knickfalte zum einfachen Öffnen
- Geeignet für Dampf- und EO-Gassterilisation
- Zwei Sterilisationsindikatoren
- Fünf verschiedene Grössen
- ISO 17665, ISO 11135, MDR 2017/745 konform



**Gratismuster auf Anfrage**




**Sterilisationsindikatoren**

Es sind zwei chemische Indikatoren vorhanden, um den erfolgreichen Sterilisationsvorgang zu bestätigen. Der blaue Indikator wird dunkelgrau nach dem Autoklavieren. Der rote Indikator wird gelb nach einer EO Gas-Sterilisation.



**Selbstschliessend – einfach zu öffnen**

Einfach den Schutzstreifen entfernen, falten und mit den Fingern pressen. Der Beutel bleibt dicht verschlossen und erhält die Sterilität.

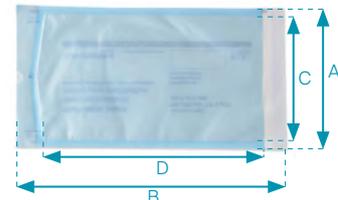

**Dimensionen**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
83	160	65	110
90	260	70	205
135	260	115	205
190	360	170	300
300	395	270	335

**Kontrolle der Intaktheit**

Die blaugesprenkelte Folie ermöglicht es, die Intaktheit der Folie/des Beutels einfach zu kontrollieren. Niemals einen beschädigten Beutel benutzen!

**Bestellinformationen**

Beschreibung	Dimensionen		Material	Verpackung	Kat. Nr.
Beutel, selbstklebend	83 x 160 mm	3.3" x 6.3"	Med. Güteklasse Papier/PET/CPP	200 / Vpk	3210.0816
Beutel, selbstklebend	90 x 260 mm	3.5" x 10.2"	Med. Güteklasse Papier/PET/CPP	200 / Vpk	3210.0926
Beutel, selbstklebend	135 x 260 mm	5.3" x 10.2"	Med. Güteklasse Papier/PET/CPP	200 / Vpk	3210.1326
Beutel, selbstklebend	190 x 360 mm	7.5" x 14.2"	Med. Güteklasse Papier/PET/CPP	200 / Vpk	3210.1936
Beutel, selbstklebend	300 x 395 mm	11.8" x 15.6"	Med. Güteklasse Papier/PET/CPP	200 / Vpk	3210.3040



Video ansehen