

Bolsas de esterilización Qualitix®

Adaptables a cualquier dispositivo de laboratorio, médico, dental o veterinario, de tamaño pequeño a mediano, las bolsas Qualitix® de un solo uso proporcionan una envoltura fácil y eficaz de los artículos que requieren esterilización. Fabricadas con papel robusto de grado médico, las bolsas se cierran herméticamente con la tira autoadhesiva para mantener la esterilidad. El contenido permanece siempre visible a través de la película laminada transparente PET / CPP.

- Material robusto duradero
- Rápida identificación del contenido
- Tira autoadhesiva grande, fácil de cerrar
- Sello superior de chevron para una rápida apertura
- Adecuadas para la esterilización de vapor y de gas EO
- Dos indicadores de esterilización
- Cinco tamaños diferentes
- Conformidad con ISO 17665, ISO 11135, MDR 2017/745



Muestras gratuitas a petición




Indicadores de esterilización

Dos indicadores químicos incluidos para confirmar el proceso adecuado de esterilización. El indicador azul se vuelve gris oscuro después de la esterilización en autoclave, el indicador rojo se vuelve amarillo después de la esterilización con gas de óxido de etileno (EO).



Autoadhesiva - apertura rápida

Simplemente pelar la tira de protección, doblar y prensar con los dedos. La bolsa permanece firmemente sellada para mantener la esterilidad del producto.

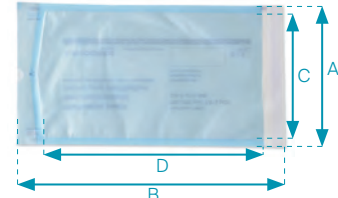

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
83	160	65	110
90	260	70	205
135	260	115	205
190	360	170	300
300	395	270	335

Control de la integridad

La película laminada teñida de azul permite el control fácil de la integridad de la película/bolsa. No utilizar una bolsa dañada.

Información de pedido

Descripción	Dimensiones		Material	Embalaje	Código
Bolsa, autoadhesiva	83 x 160 mm	3.3" x 6.3"	Papel de grado med./PET/PPP	200 / caja	3210.0816
Bolsa, autoadhesiva	90 x 260 mm	3.5" x 10.2"	Papel de grado med./PET/PPP	200 / caja	3210.0926
Bolsa, autoadhesiva	135 x 260 mm	5.3" x 10.2"	Papel de grado med./PET/PPP	200 / caja	3210.1326
Bolsa, autoadhesiva	190 x 360 mm	7.5" x 14.2"	Papel de grado med./PET/PPP	200 / caja	3210.1936
Bolsa, autoadhesiva	300 x 395 mm	11.8" x 15.6"	Papel de grado med./PET/PPP	200 / caja	3210.3040



Ver el vídeo